



# 1. 제품설치 전 확인

1. 바닥이 평평한 곳에 설치해 주십시오.  
(제품이 파손 될 우려가 있습니다.)

2. 습기나 먼지가 많은 곳에서는 가급적 설치를 피해 주십시오.  
(감전 및 화재의 위험이 있습니다.)

3. 지정된 순서에 맞게 설치해 주십시오.

4. 제품을 쓰러뜨리거나 충격을 가하지 마십시오.  
(오작동의 위험이 있습니다.)

5. 제품을 설치할 때 정격전압(100-240V~)을 확인해 주십시오.  
(회로 파손 및 화재의 원인이 될 수도 있습니다.)

6. 손상된 전원케이블이나 낡은 콘센트를 사용하지 마십시오.




## 2. 제품설치

### 본체 설치방법

1


본체박스 및 이너박스를 열어 구성품을 꺼내 주십시오.  
패드를 선택하여 본체수납함의 커넥터와 연결해 주십시오.  
\* 본체수납함 내부 정해진 커넥터에 연결 합니다.

\* 이너박스 : 복부패드, 사각패드, 좌우패드

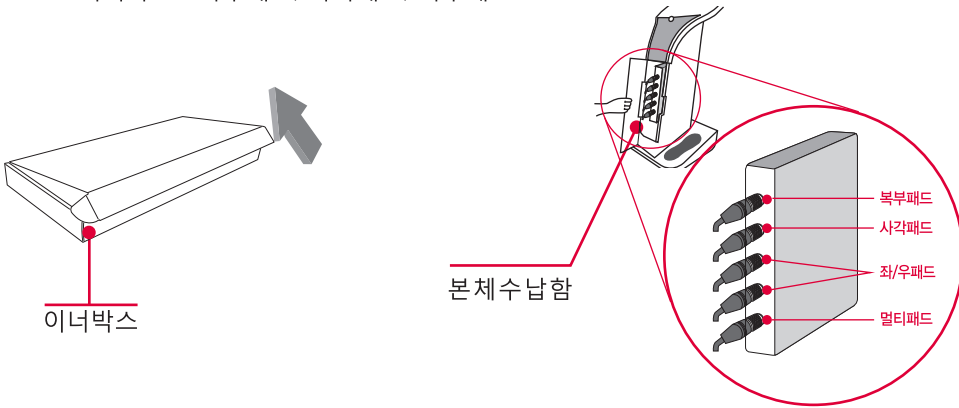

2

전원케이블을 연결한 후 패트설치 및 착용하여 사용하십시오.  
\* 패드설치 및 착용 방법은 18~22페이지를 참조 하십시오.

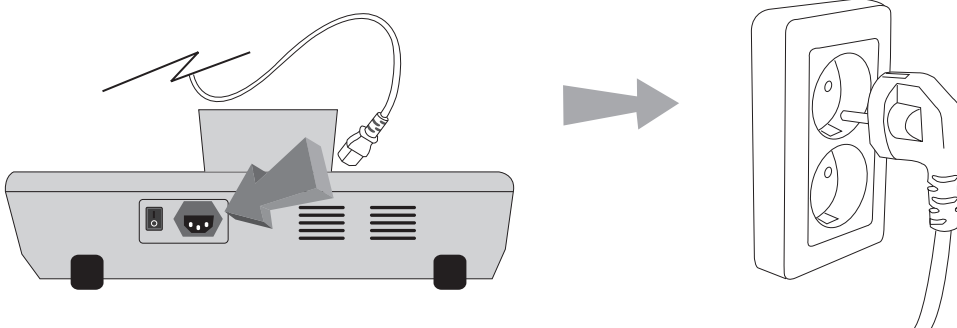

주의

- 사용전 반드시 패드를 착용한 후 사용 하십시오.



## 2. 제품설치


### 패드 설치방법

1

▪ 복부패드


- 아래 그림과 같이 복부패드와 복부벨트를 연결해 주십시오.

1. 1번 벨크로를 패드 홀에 끼운 후 하단 벨크로에 체결 하십시오.

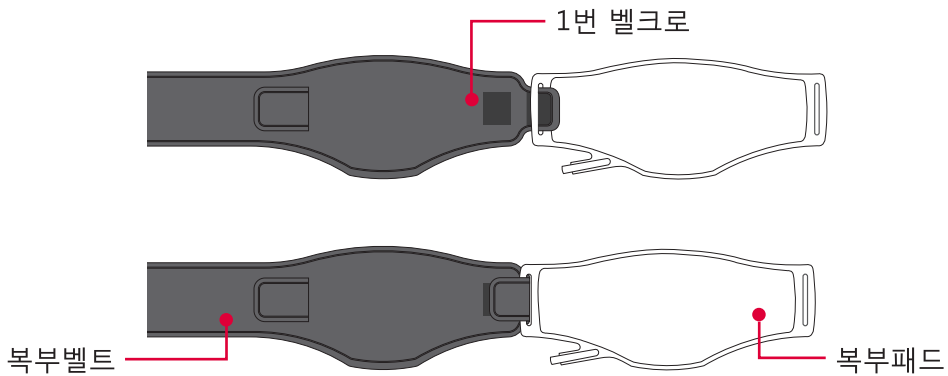

2. 패드를 뒤집어 2번 벨크로를 패드 홀에 끼운 후 하단 벨크로에 체결 하십시오.

3. 패드를 착용 후 본체커넥터 부의 복부패드 커넥터에 연결 하십시오.

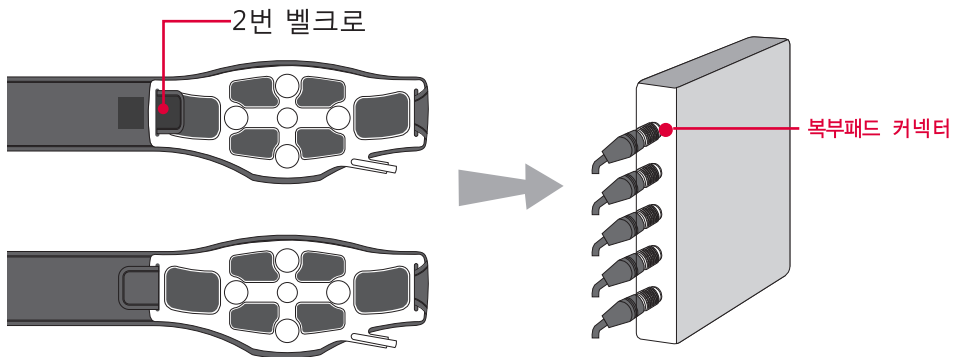




## 2. 제품설치

### 2

#### ■ 좌우패드


- 아래 그림과 같이 좌/우패드와 좌/우벨트를 연결해 주십시오.

1. 1번 벨크로를 패드 홀에 끼운 후 하단 벨크로에 체결 하십시오.

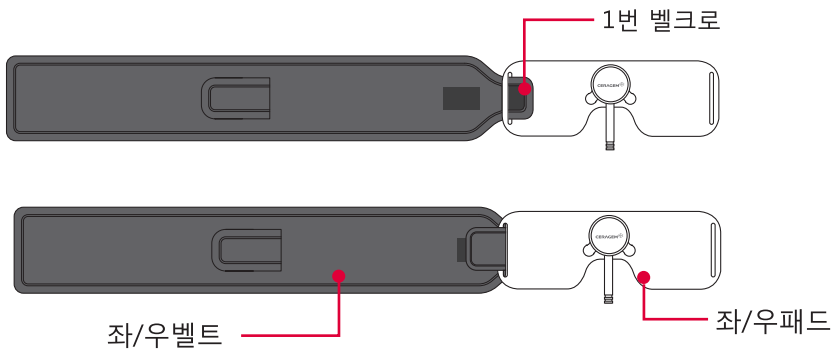

2. 패드를 뒤집어 2번 벨크로를 패드 홀에 끼운 후 하단 벨크로에 체결 하십시오.

3. 패드를 착용 후 본체커넥터부의 좌/우패드 커넥터에 연결 하십시오.

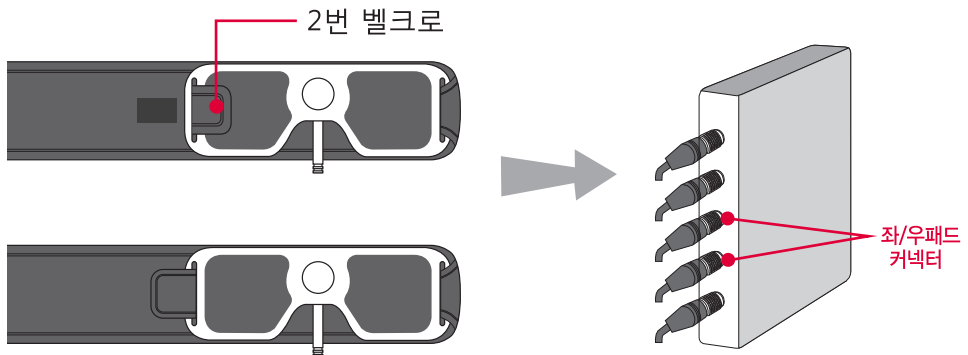




## 2. 제품설치

3

### ■ 사각패드

- 사각패드와 커넥터를 그림과 같이 연결 하십시오.
- 패드를 착용 후 본체커넥터부의 사각패드 커넥터에 연결 하십시오.

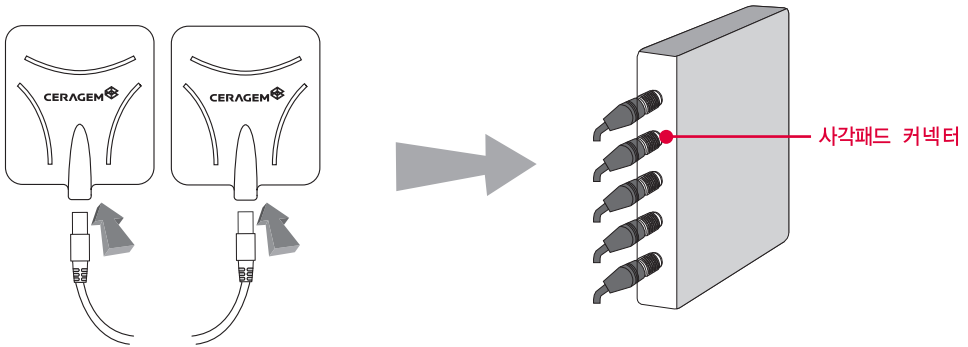

4

### ■ 멀티패드

- 멀티패드와 본체커넥터부의 멀티패드 커넥터와 연결 하십시오.
- 전도성 실리콘에 전용 매개체(젤, 물티슈 등)를 충분히 고르게 바르고 피부에 밀착 시키십시오.

